




SOLUÇÕES PARA REPRODUÇÃO HUMANA

Parcerias que só a **Handle** faz!



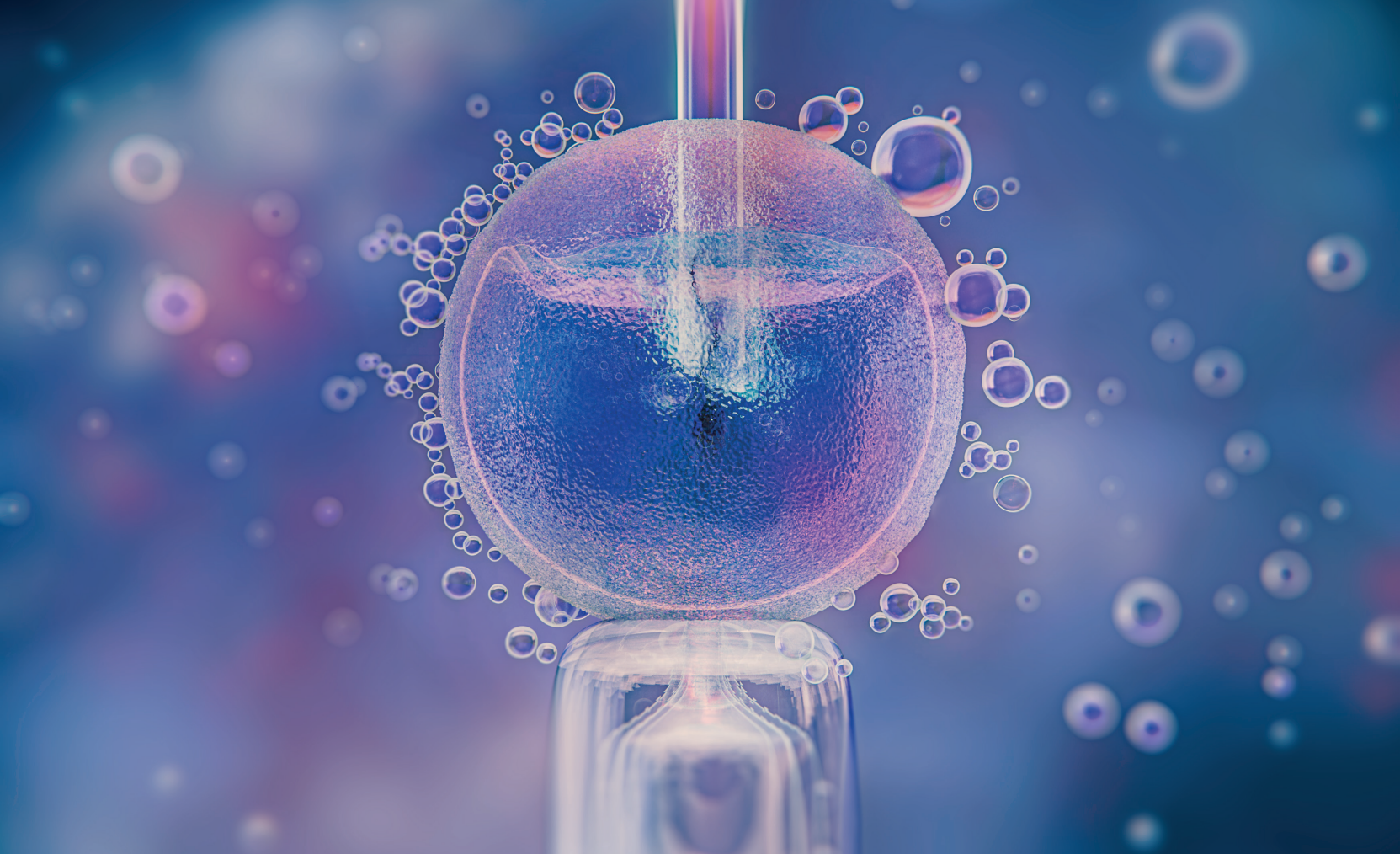

Somos distribuidores exclusivos **Cook Medical** no Brasil, para produtos descartáveis e soluções para reprodução humana, ginecologia e medicina fetal.

Somos distribuidores exclusivos da **Evident**, com a mais completa e avançada linha de microscopia do mercado. A qualidade dos microscópios **Evident** é reconhecida em todo o mundo.

A **linha de plásticos essenciais para FIV**, também compõe o nosso portfólio. Ela atende aos rigorosos requisitos de testes de certificação e alta qualidade, o que é fundamental para garantir a segurança e a eficácia do procedimento.

RASTREABILIDADE

Temos controle de rastreabilidade logística de entrega dos produtos até o cliente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Contamos com nosso time próprio de engenheiros para realizar testes de manutenção preventiva e corretiva de todo o nosso parque de equipamentos, instalação e treinamento técnico em nossa estrutura ou diretamente no cliente.



EQUIPE E ATUAÇÃO

Ao longo dos últimos anos crescemos e nos estruturamos para atender diretamente todo o território nacional com nossa equipe multiprofissional, hoje composta por mais de 220 colaboradores. Através da Handle Conhecimento, levamos informação e treinamento às equipes médicas para garantir a melhor performance dos nossos produtos e de forma personalizada.

SOLUÇÕES PARA BAIXA COMPLEXIDADE


Inseminação Intrauterina

Cateter de inseminação intrauterina Insemi-Cath

Utilizado para a introdução de espermatozóides lavados na cavidade uterina. Possui uma extremidade proximal mais larga, projetada para afixar a uma seringa de deslizamento padrão.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro do Cateter (Fr)	Comprimento do Cateter (cm)
J-IUIC-351300	3.5	13
J-IUIC-351304	3.5	13

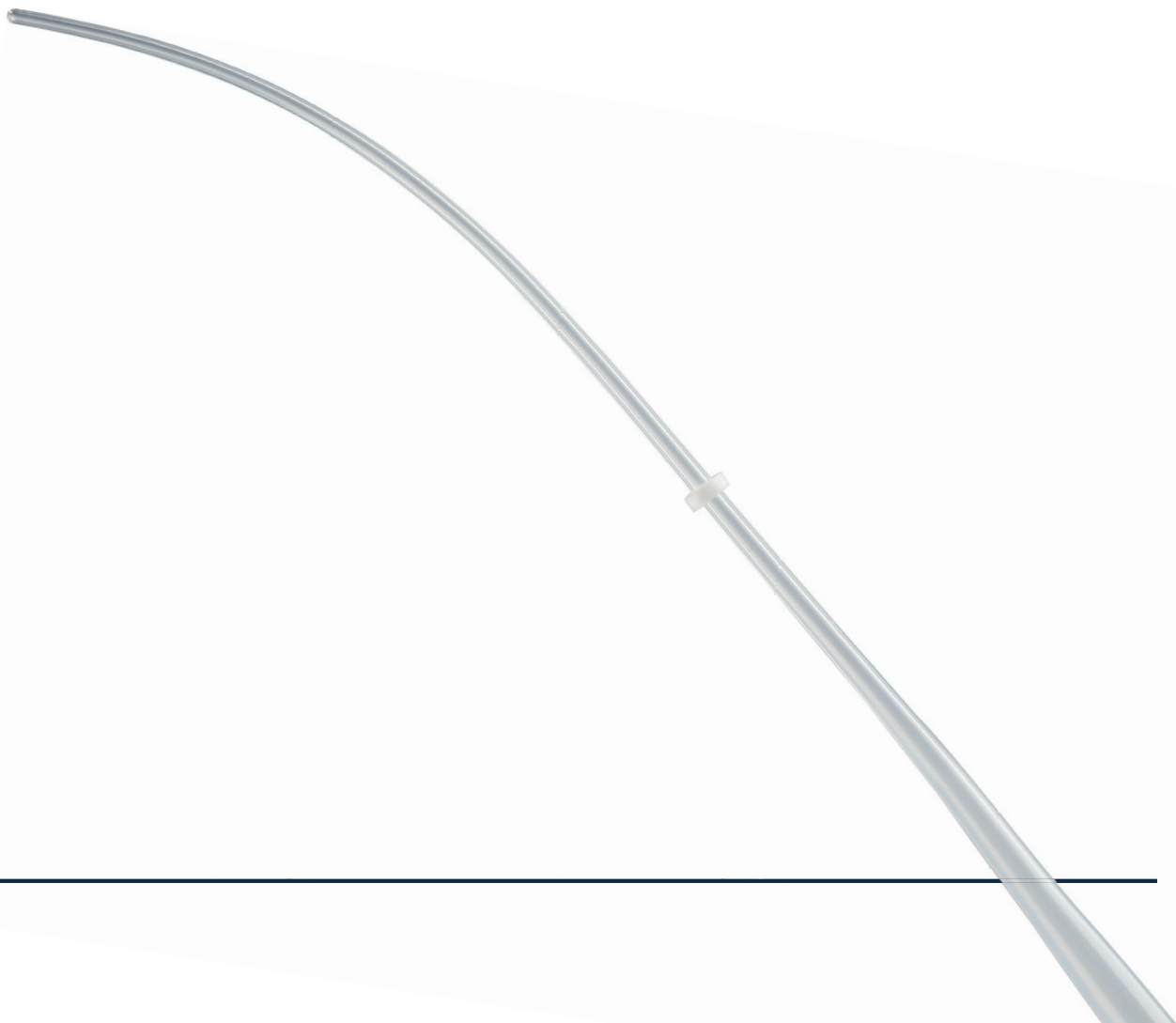

SOLUÇÕES PARA BAIXA COMPLEXIDADE

Inseminação Intrauterina

Cateter de inseminação intrauterina Shepard

Utilizado para a introdução de espermatozóides lavados na cavidade uterina. Seu posicionador ajustável permite que o cateter seja colocado dentro do útero. A cânula interna de aço inoxidável possui ponta curva.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro do Cateter (Fr)	Comprimento do Cateter (cm)
J-IUIE-542009	5.4	20



SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE

Aspiração Folicular

Agulha para aspiração de oócitos - OSN

Agulha de single lumen utilizada para aspiração laparoscópica ou transvaginal (guiada por ultrassom), e flushing de oócitos de folículos ovarianos. O punho ergonômico proporciona conforto e controle durante a aspiração. Sua ponta com tecnologia EchoTip® melhora a visualização sob ultrassom. Apresenta duas versões de bisel: A e B.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Calibre Agulha (ga)	Comprimento do Agulha (cm)	Comprimento Linha de Aspiração (cm)
K-OSN-1630-B-60-US	16	30	60
K-OSN-1630-B-90-US	16	30	90
K-OSN-1635-B-90-US	16	35	90
K-OSN-1725-B-60-US	17	25	60
K-OSN-1730-B-60-US	17	30	60
K-OSN-1730-B-90-US	17	30	90
K-OSN-1735-A-90-US	17	35	90
K-OSN-1735-B-60-US	17	35	60
K-OSN-1735-B-90-US	17	35	90
K-OSN-1633-R-B-90	16	33	90
K-OSN-1635-R-B-90	16	35	90
K-OSN-1633-R-B-90	17	33	90
K-OSN-1735-R-B-90	17	35	90



SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE


Aspiração Folicular

Agulha para aspiração de oócitos - OPS

Agulha de single lumen utilizada para aspiração de oócitos. Seu design facilita a rotação da agulha durante a aspiração. O encaixe do polegar indica a orientação do bisel. A tecnologia EchoTip® melhora a visualização da ponta da agulha sob ultrassom. Apresenta duas versões de bisel: A e B.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Calibre Agulha (ga)	Comprimento do Agulha (cm)	Comprimento Linha de Aspiração (cm)
K-OPS-1630-H-B-60	16	30	60
K-OPS-1635-H-B-90	16	35	90
K-OPS-1635-T-A-90	16	35	90
K-OPS-1728-T-A-60	17	28	60
K-OPS-1730-R-B-60	17	30	60
K-OPS-1733-T-A-60	17	33	60
K-OPS-1735-R-B-90	17	35	90
K-OPS-1735-T-A-60	17	35	60
K-OPS-1735-T-A-90	17	35	90

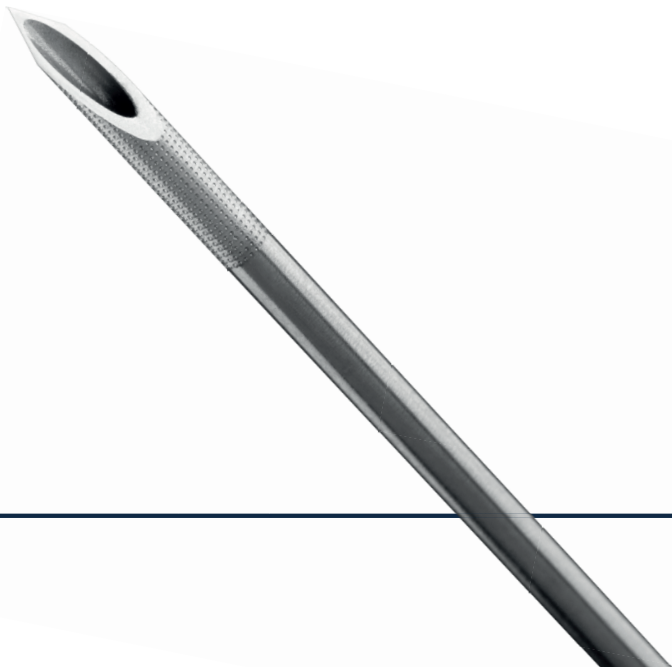

SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE

Aspiração Folicular

Agulha para aspiração de oócitos - OPSD

Agulha de duplo lumen utilizada para aspiração e flushing de oócitos de folículos ovarianos. O design de duplo lumen permite a descarga simultânea ou intermitente do meio e a aspiração do fluido folicular. Sua ponta com a tecnologia EchoTip® melhora a visualização sob ultrassom. Apresenta duas versões de bisel: A e B.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Calibre Agulha (ga)	Comprimento do Agulha (cm)	Comprimento Linha de Aspiração (cm)
K-OPSD-1630-A-S-US	16	30	70
K-OPSD-1630-B-L-US	16	30	100
K-OPSD-1630-B-S-US	16	30	70
K-OPSD-1633-A-S-US	16	33	70
K-OPSD-1635-A-L-US	16	35	100
K-OPSD-1635-A-S-US	16	35	70
K-OPSD-1635-B-S-US	16	35	70
K-OPSD-1735-A-S-US	17	35	70
K-OPSD-1735-B-S-US	17	35	70



SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE


Micromanipulação

Micropipeta para denudação e manipulação - Flexipet®

Utilizada para denudação e ou manipulação de oócitos e embriões.
Também utilizada para manipulação de blastômeros, corpos polares, blastocistos e complexo oócito-cumulus.
Feita de policarbonato flexível evitando quebra e ranhura de placas.
Os tubos que acondicionam os filetes são identificados por cores de acordo com as micras (µm).
Cada tubo contém 10 filetes.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro Interno (µm)	Cor Tubo	Quantidade Tubo	Aplicação
K-FPIP-1080-10BS	80	Roxo	1	Manipulação de blastômero e corpo polar
K-FPIP-1100-10BS	100	Preta	5	Denudação / Manipulação de oócito e embrião
K-FPIP-1120-10BS	120	Azul	5	Denudação / Manipulação de oócito e embrião
K-FPIP-1140-10BS-5	140	Branco	5	Denudação / Manipulação de oócito e embrião
K-FPIP-1170-10BS-5	170	Vermelho	5	Denudação / mManipulação de oócito e embrião
K-FPIP-1300-10BS-5	300	Marrom	5	Manipulação de blastocisto
K-FPIP-1600-10BS-5	600	Verde	5	Manipulação do complexo oócito-cumulus

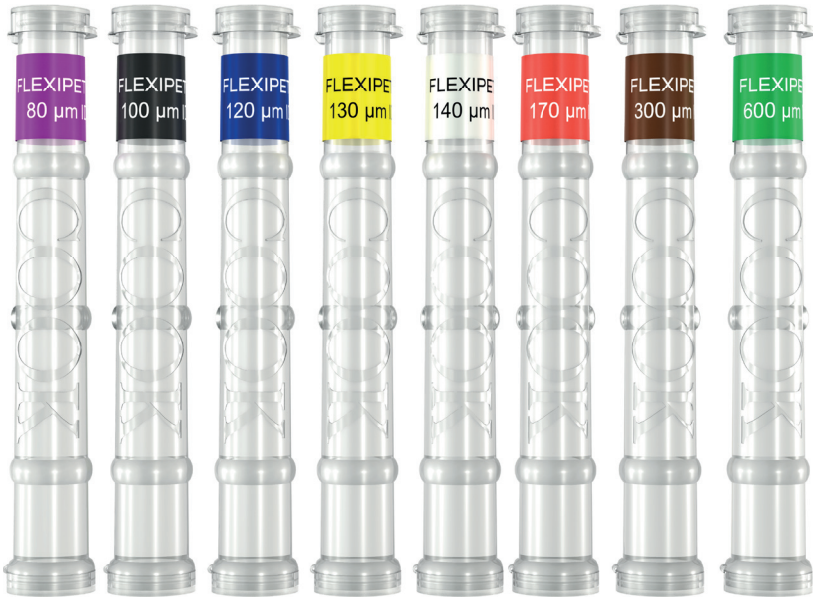

SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE


Micromanipulação

Micropipeta de injeção

Utilizada para injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) de oócitos. A Micropipeta de Injeção foi projetada especificamente para um controle preciso dos espermatozoides. Possui chanfro bem definido para perfurar a zona pelúcida. Vendida em caixa com 10 unidades, embaladas individualmente.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro Interno (µm)	Diâmetro Externo (µm)	Ângulo Ponta Distal (°)
K-MPIP-1020	5	7	20
K-MPIP-1030	5	7	30
K-MPIP-1035	5	7	35
K-MPIP-3130	4.7	6	30
K-MPIP-3135	4.7	6	35
K-MPIP-3330	5.5	7	30
K-MPIP-3335	5.5	7	35

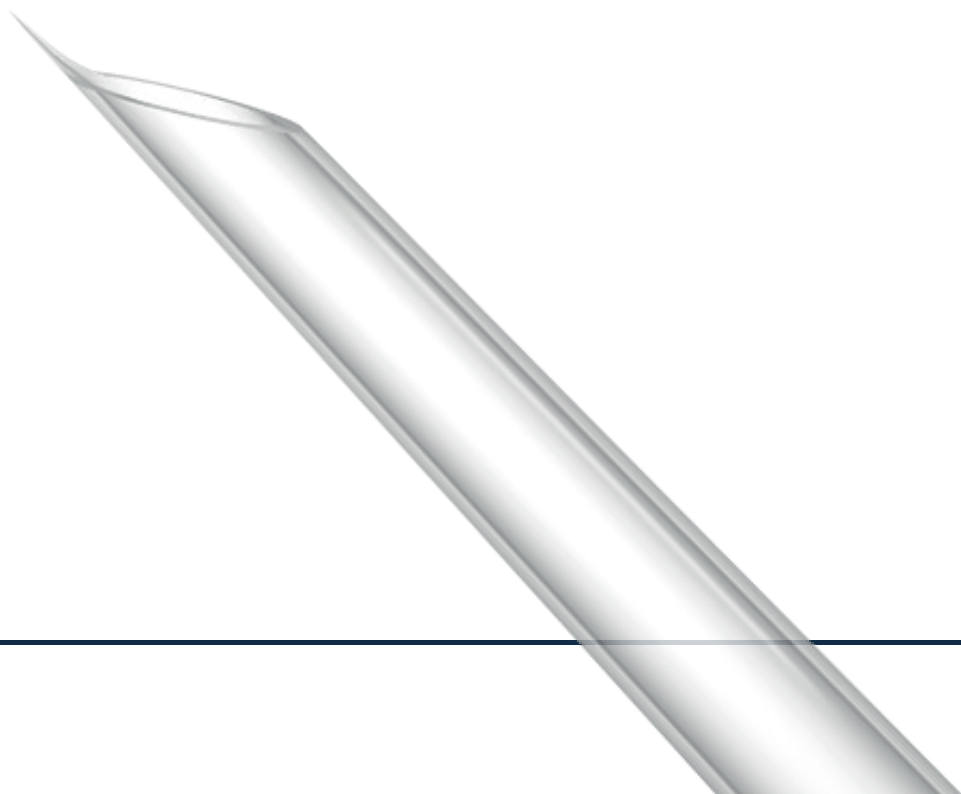

SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE


Micromanipulação

Micropipeta de holding

Utilizada para segurar o oócito para injeção intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI) ou o embrião para outras técnicas de micromanipulação.
A Micropipeta de Holding possui superfície lisa e polida que confere estabilidade e poder de retenção.
Vendida em caixa com 10 unidades, embaladas individualmente.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro Interno (µm)	Diâmetro Externo (µm)	Ângulo Ponta Distal (°)
K-HPIP-1030	17	80	30
K-HPIP-1035	17	80	35
K-HPIP-2130	23	110	30
K-HPIP-2135	23	110	35
K-HPIP-3330	34	120	30
K-HPIP-3335	34	120	35

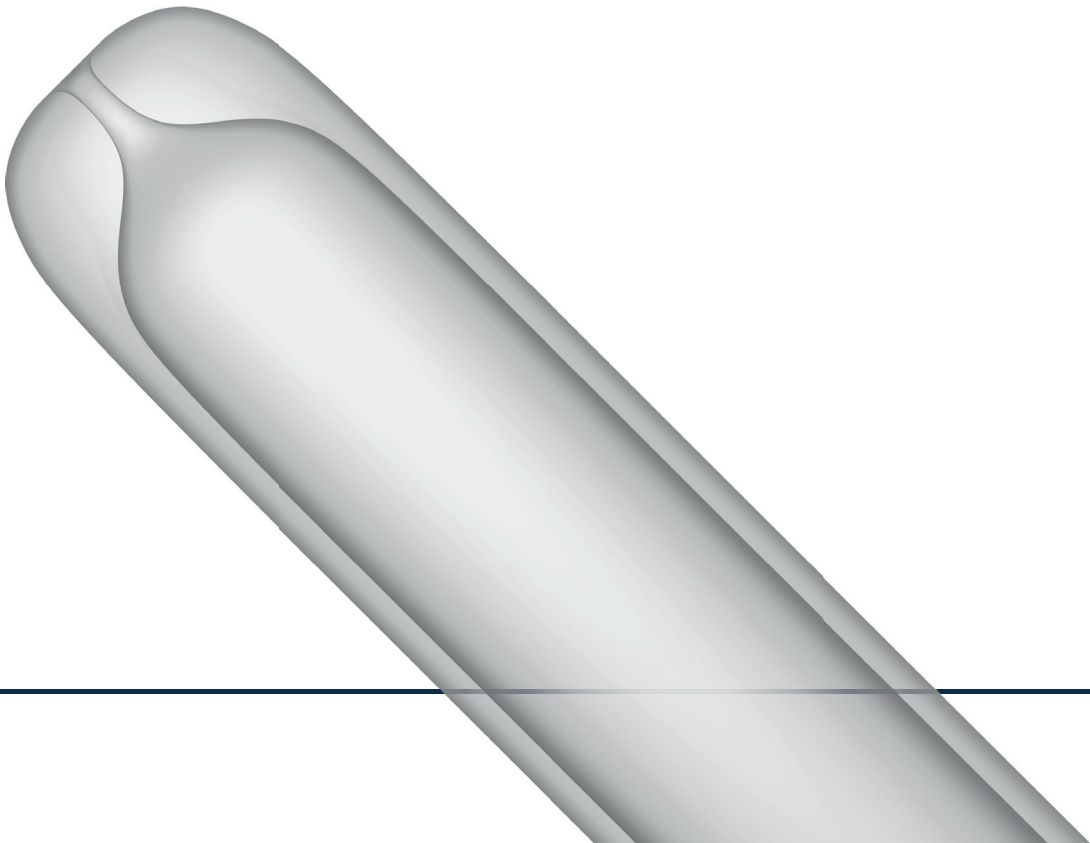

SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE

Micromanipulação

Micropipeta para aspiração de blastômero

Utilizada para aspirar blastômero ou células trofotodérmicas para diagnosticar distúrbios genéticos antes da seleção do embrião.


A ponta da pipeta é cortada em linha reta e polida.

Suas paredes paralelas facilitam a aspiração suave.

Vendida em embalagens individuais com uma unidade.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro Interno (µm)	Diâmetro Externo (µm)	Ângulo Ponta Distal (°)
K-EBPH-3035	30	42	35
K-EBPH-3535	35	49	35

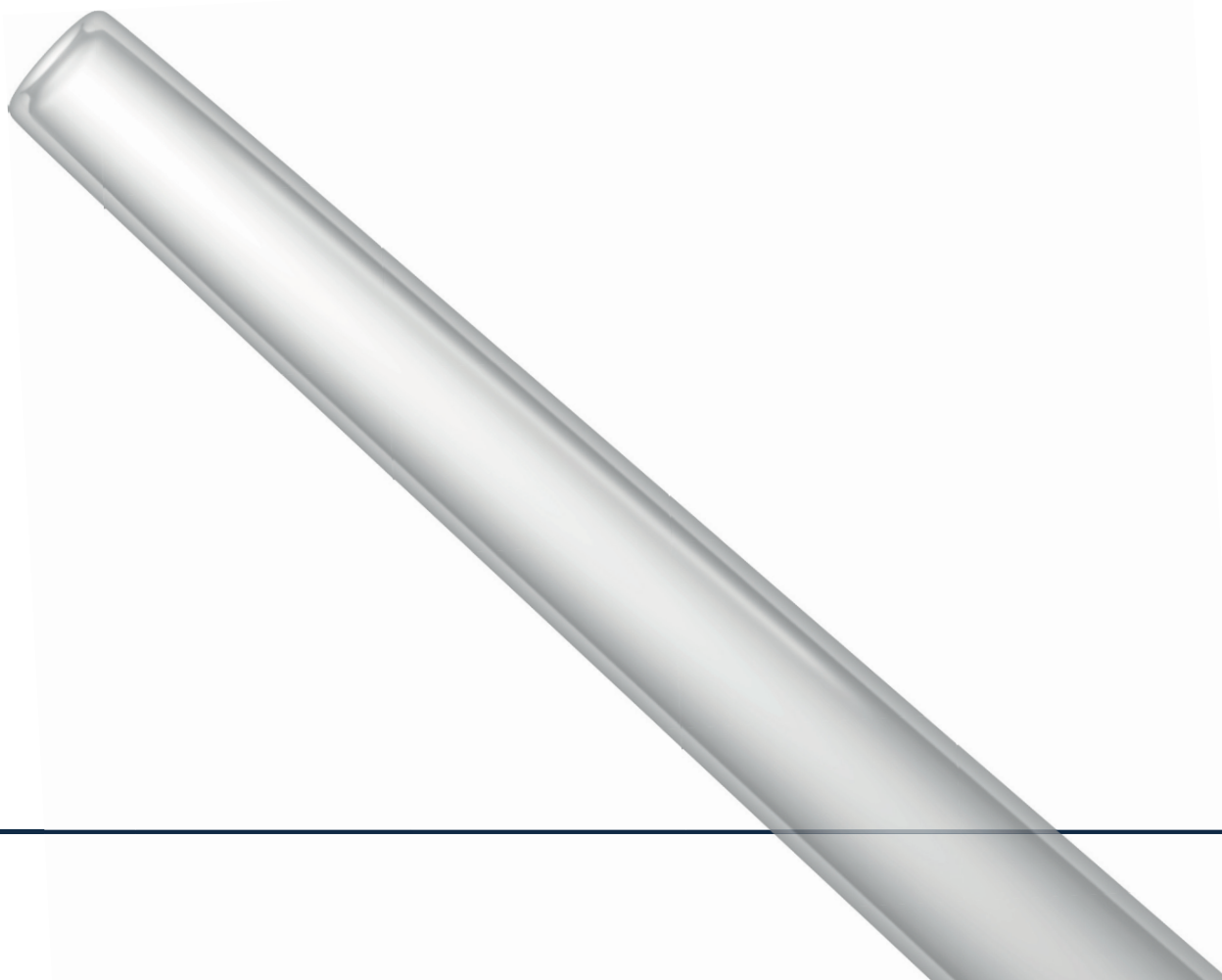

SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE

Micromanipulação

Suporte para micropipeta Flexipet®

Utilizado com a Micropipeta de Denudação e Manipulação - Flexipet®.

O volume de aspiração pode ser pré-ajustado de 0,25 µL a 3,0 µL.

Fornece o controle preciso necessário para manipulação de oócitos, embriões e/ou blastômeros. É ajustável para todos os tamanhos de pipetas de denudação e manipulação Flexipet.

Vendida com kit de anéis, ponteira e chave de manuseio para troca na manutenção da peça.

ESPECIFICAÇÕES

Referência

K-MPH-1000

K-FRO-1000



SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE


Transferência Embrionária

Cateter de transferência de embriões - Guardia™ Access

Utilizado para colocar embriões fertilizados in vitro (FIV) na cavidade uterina.
O cateter guia é curvado para adequar-se à anatomia da paciente.
A ponta do bulbo arredondado do Cateter Guia facilita a passagem pelo colo do útero.
O cateter de transferência é macio e flexível.
Possui tecnologia Microvol™ que minimiza o volume de meio necessário.
O posicionador vem configurado a 4 cm e pode ser ajustado para 5 cm.
Os cateteres guia e de transferência são embalados separadamente.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro do Cateter Guia (Fr)	Comprimento do Cateter Guia (cm)	Diâmetro do Cateter de Transferência (Fr)	Comp. do Cateter de Transferência (cm)
K-JETS-6019	6.6	16.7	2.8	23
K-JETS-7019	6.6	17.3	2.8	24

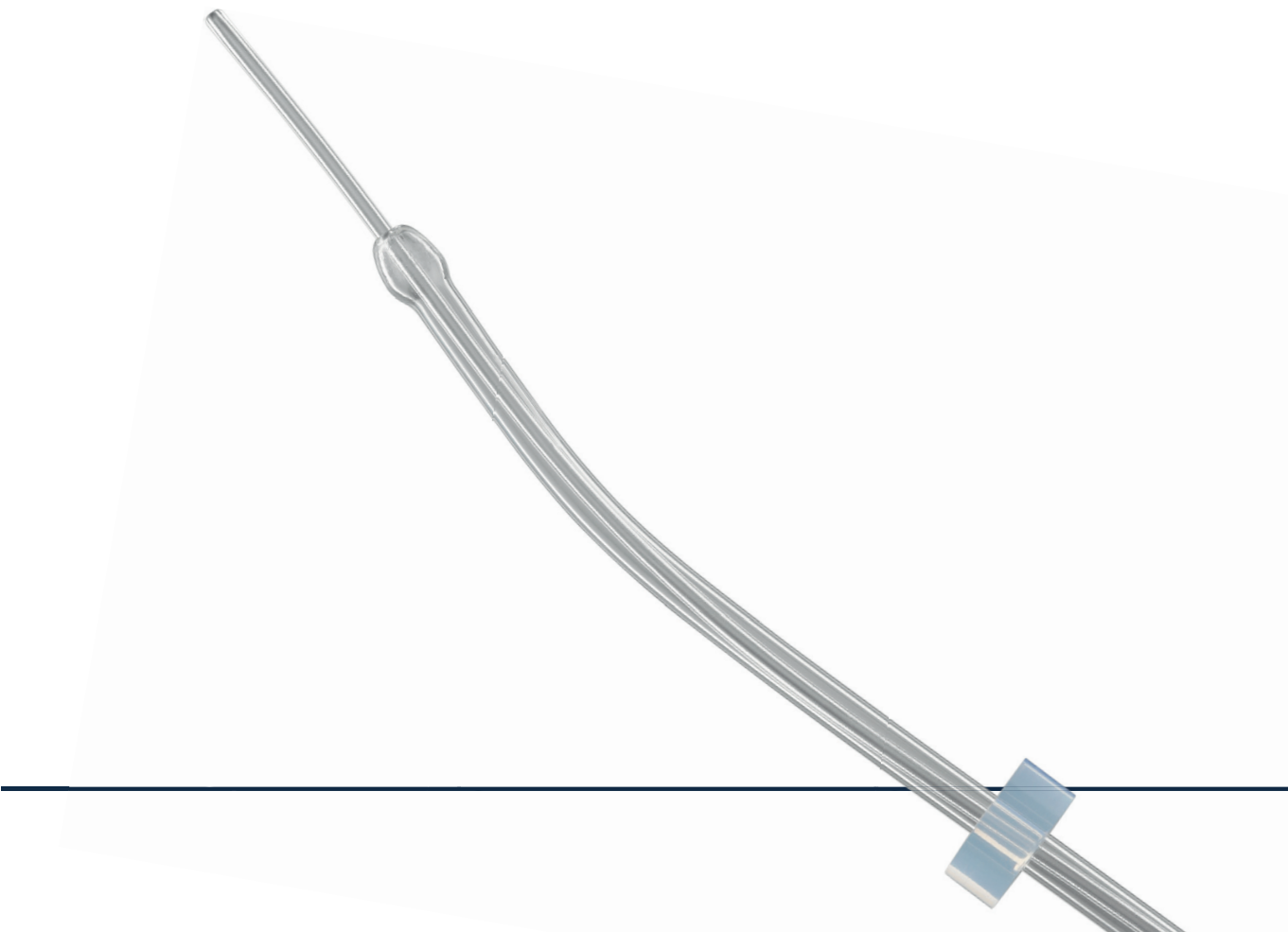

SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE


Transferência Embrionária

Cateter de transferência de embriões - Guardia™ AccessET

Utilizado para colocar embriões fertilizados in vitro (FIV) na cavidade uterina.
O cateter guia é curvado para adequar-se à anatomia da paciente.
A ponta do bulbo arredondado do Cateter Guia facilita a passagem pelo colo do útero.
O cateter de transferência é macio e flexível.
Possui tecnologia Microvol™ que minimiza o volume de meio necessário.
O posicionador vem configurado a 4 cm e pode ser ajustado para 5 cm.
Os cateteres guia e de transferência são embalados separadamente.
Possui tecnologia EchoTip® que potencializa a visualização da ponta do cateter sob ultrassom.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro do Cateter Guia (Fr)	Comprimento do Cateter Guia (cm)	Diâmetro do Cateter de Transferência (Fr)	Comp. do Cateter de Transferência (cm)
K-JETS-6019-ET	6.6	16.7	2.8	23
K-JETS-7019-ET	6.6	17.3	2.8	24

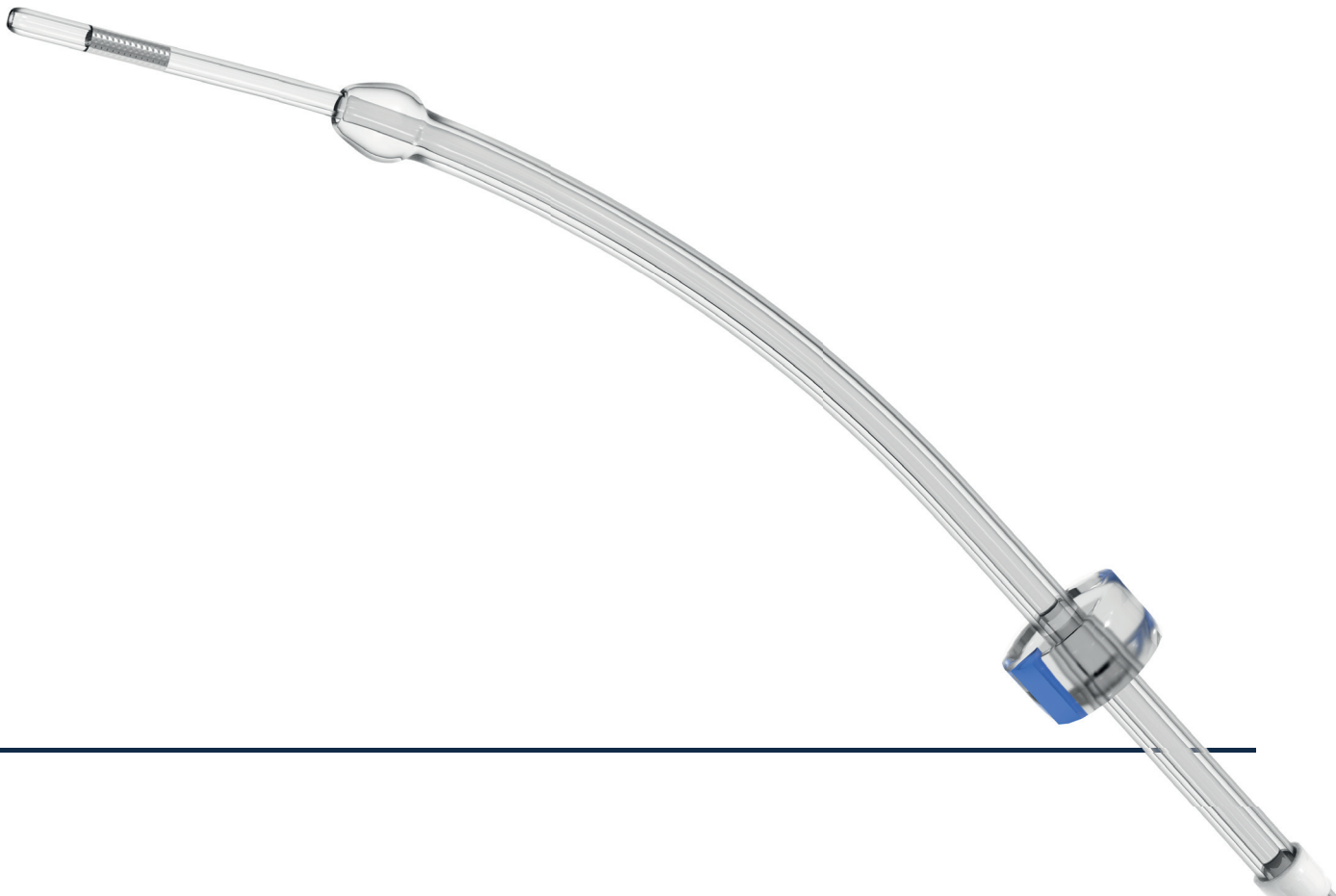

SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE

Transferência Embrionária

Dispositivo auxiliar de cateter de transferência embrionária - Obturador

Utilizado para complementar e auxiliar o acesso uterino de um cateter de transferência de embriões, na colocação de embriões fertilizados in vitro (FIV) em um procedimento com dificuldade de acesso à cavidade uterina. Seu posicionador retrátil permite um comprimento ajustável que se adequa à toda a linha de cateteres de transferência de embriões Cook Medical.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro (Fr)	Comprimento (cm)
J-UOB-2828	2.8	28
J-UOB-4028	4.0	28
J-UOB-4028-ST	4.0	28



SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE


Transferência Embrionária

Cateter de transferência de embriões - Soft-Pass™

Utilizado para colocar embriões fertilizados in vitro (FIV) na cavidade uterina.
O cateter guia macio e flexível foi projetado para facilitar a transferência embrionária.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro do Cateter Guia (Fr)	Comprimento do Cateter Guia (cm)	Diâmetro do Cateter de Transferência (Fr)	Comp. do Cateter de Transferência (cm)
K-J-SPPE-681200	6.8	12	4.4	19.7
K-J-SPPE-681700	6.8	17	4.4	24.7

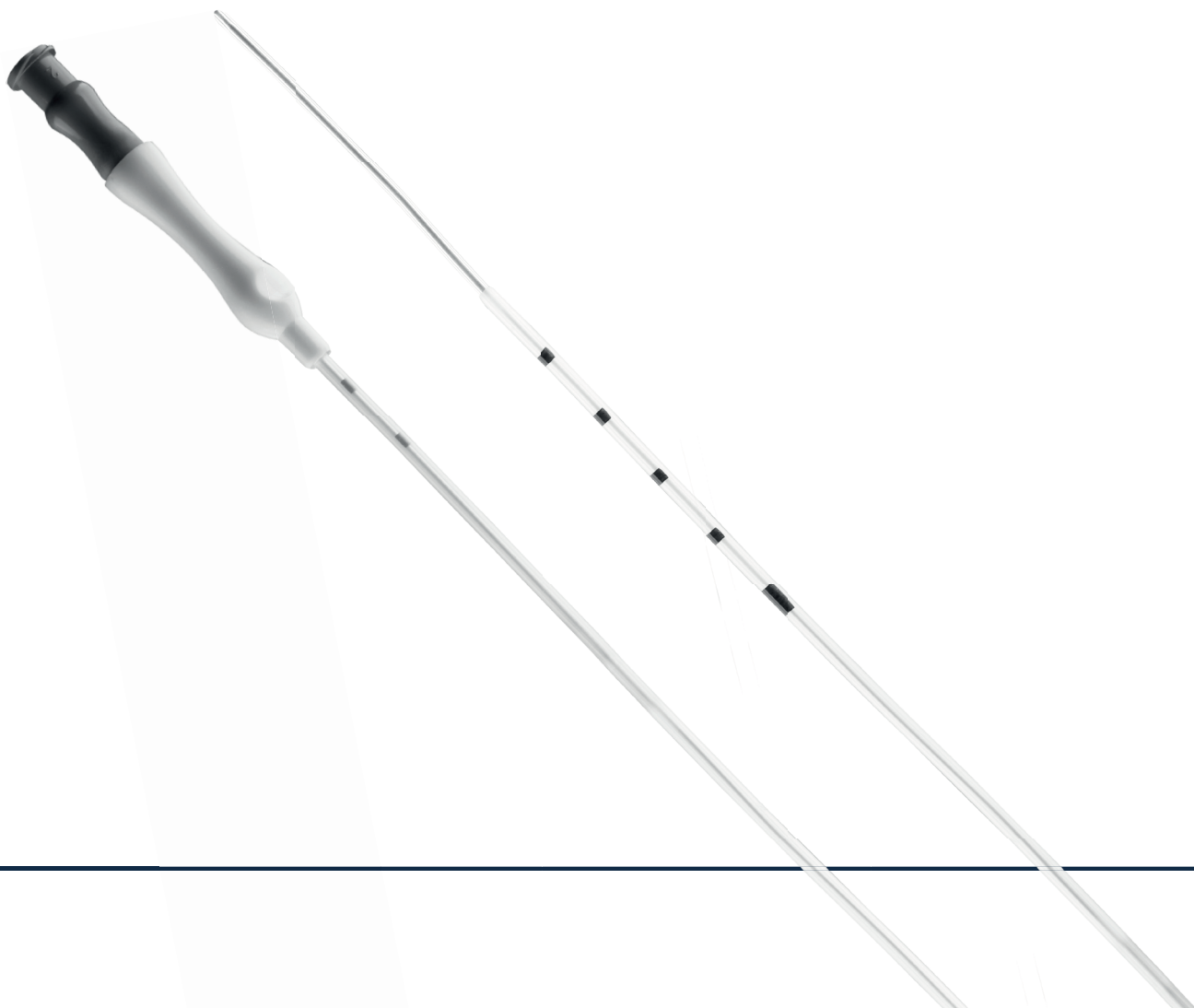

SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE


Transferência Embrionária

Cateter de transferência de embriões - Soft-Pass™ Echotip®

Utilizado para colocar embriões fertilizados in vitro (FIV) na cavidade uterina.
O cateter guia macio e flexível foi projetado para facilitar a transferência embrionária.
O cateter de transferência possui uma cânula de suporte em aço inoxidável integrada que auxilia na colocação do cateter.
Possui tecnologia Echotip® que potencializa a visualização sob ultrassom.

ESPECIFICAÇÕES

Referência	Diâmetro do Cateter Guia (Fr)	Comprimento do Cateter Guia (cm)	Diâmetro do Cateter de Transferência (Fr)	Comp. do Cateter de Transferência (cm)
K-J-SPPE-681210-ET	6.8	12	4.4	19.7
K-J-SPPE-681710-ET	6.8	17	4.4	24.7

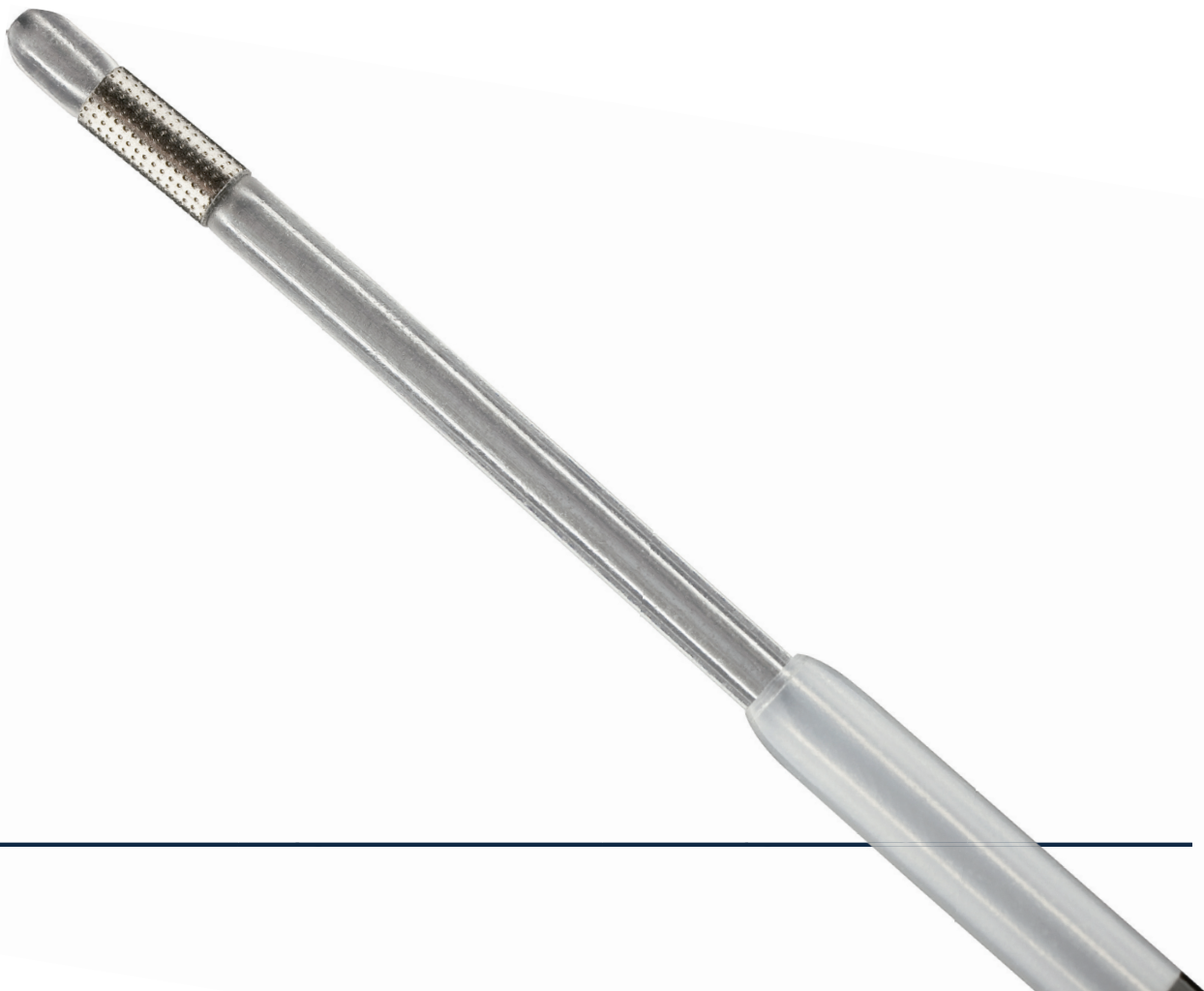

SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE

Equipamentos

Aquecedor de tubos de ensaio

Usado para controlar a temperatura dos tubos de ensaio e seu conteúdo durante a recuperação do oócito e minimizar qualquer trauma do procedimento ao gameta.

O painel frontal permite a observação contínua do conteúdo dos tubos.

O painel pode ser removido para limpeza. O aquecedor usa energia de 12 VCC e mantém uma temperatura operacional de 36,9°C.

ESPECIFICAÇÕES

Referência

K-FTH-1012

K-APS-300



SOLUÇÕES PARA ALTA COMPLEXIDADE

Equipamentos

Frasco de umidificação para incubadora de bancada

Utilizado para fornecer umidificação para a Incubadora de Bancada MINC™. O frasco tem uma linha indicativa do volume de água destilada ou para injeção, ideal para manutenção do ambiente úmido necessário ao desenvolvimento do embrião.

ESPECIFICAÇÕES

Referência

K-MINC-CTS-S




MAPA DE ATUAÇÃO

● Região metropolitana de SP , Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Recife e Rio de Janeiro
Contato: Fábio Magalhães
E -mail: fabio.magalhaes@handle.com.br
Telefone: (11) 97587-0391

● **Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul**
E-mail: fertilidade@handle.com.br
Telefone: (51) 99850-7004

● Norte, Nordeste (exceto Pernambuco), GO, MT, MS, DF, MG, ES, interior de SP
Contato: Camila Santos
E-mail: camilasantos@handle.com.br
Telefone: (19) 99770-6321

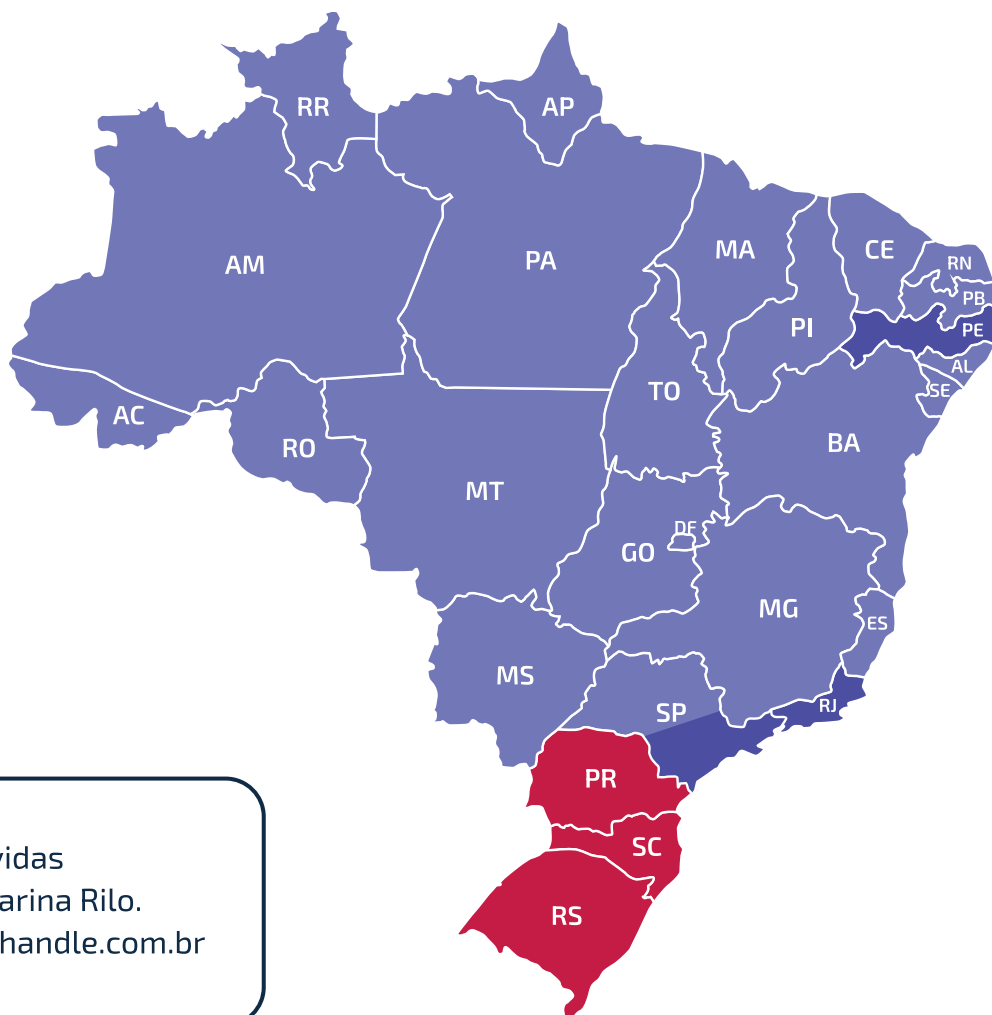

Para esclarecer dúvidas técnicas fale com Karina Rilo.
E-mail: karina.rilo@handle.com.br



Fique conectado com a gente!

🌐 handle.com.br 📸 [handlefertilidade](https://www.instagram.com/handlefertilidade)

